


Medcomp kateter

Akutt kateter for dialyse, onkologi og intensiv


Dialysekateter og kateterlås av høy kvalitet fra verdens største kateterprodusent siden 1978.

Leverer kvalitetsprodukter gjennom kontinuerlig utvikling
- innen kateterforskning, produksjon og design.

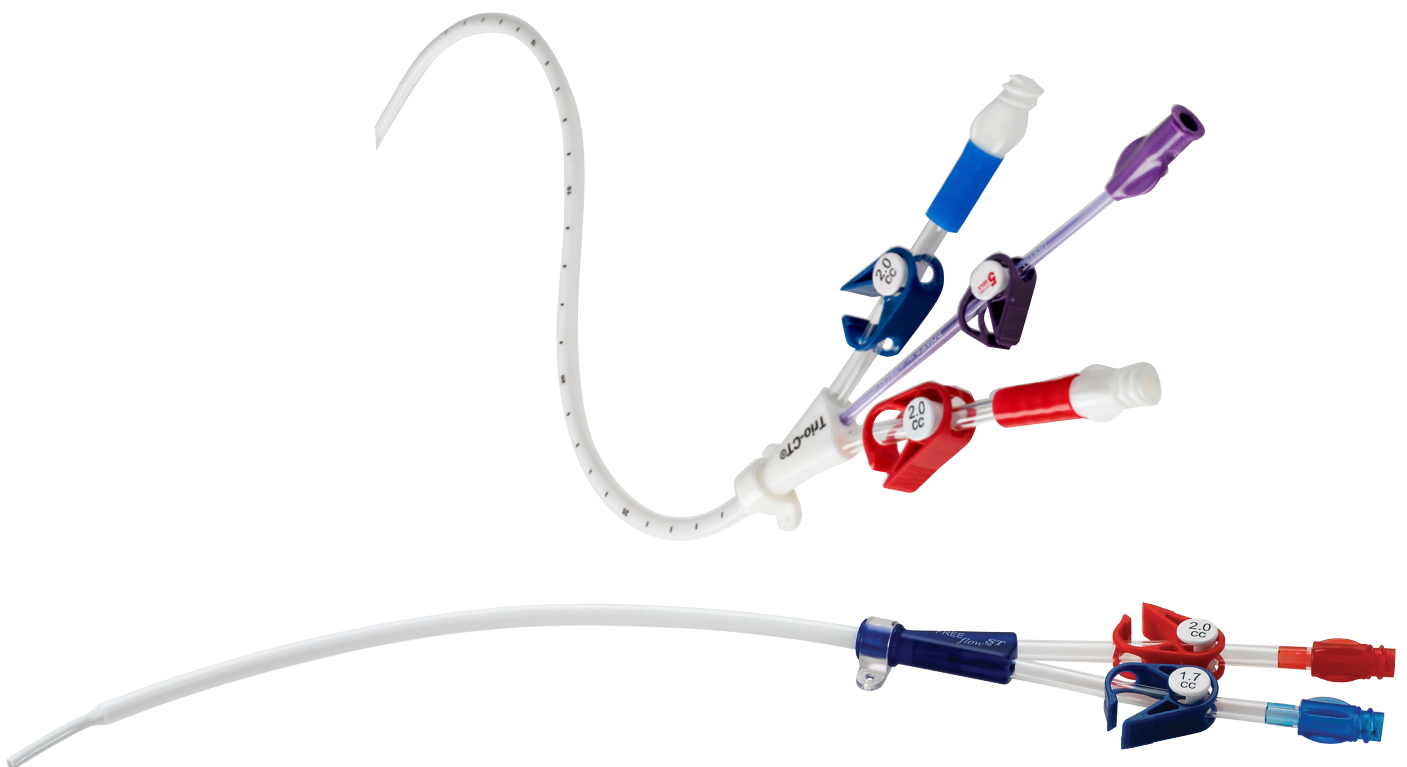

MEDCOMP DIALYSEKATETER

AKUTT KATETER FOR DIALYSE

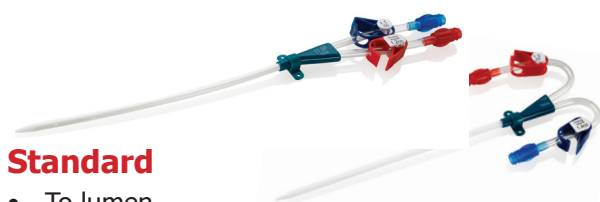

Standard

- To lumen
- 11 FR
- Finnes rett og med bøy
- Leveres i komplette sett inklusiv: guidewire, dilator, nål mm
- Standardkateter til en god pris



Hemo-Cath® ST

- Biokompatibelt silikonmateriale
- Innlegges med Seldingerteknikk
- 13.5 FR gir mulighet til høy blodflow
- Mykt materiale gir minimal risiko for knekk
- Kateterløpene kan bøyes uten risiko for knekk. Følger med en spesiell festeordning som gjør at du kan bøye løpene. Dette gjør det enklere når pasienten har kateteret i vena jugularis interna.
- Leveres med komplett sett for innleggelse
- Finnes i lengdene: 15, 20, 24 og 28 cm

AKUTT KATETER FOR ONKOLOGI



Standard

- To lumen
- 11 FR
- Finnes rett og med bøy
- Leveres i komplette sett inklusiv: guidewire, dilator, nål mm
- Standardkateter til en god pris



Duo-Flow III®

- 2-lumen polyuretankateter
- 13 FR
- Volummarkeringer i lumen
- Sidehull, butt kateterspiss gir redusert risiko for stenose
- Høy blodflow
- Svingbare vinger
- Finnes i rett og med bøy



Free Flow® ST

- 15,5 FR
- To lumen
- Finnes i rett eller med bøy
- Lateral punktering, 360 ° venøs lumen av arterielumen
- Kateterlås som DuraLock-C holder seg bedre inni kateteret
- Free-Flow® ST gir mulighet for ekstremt høy blodflow
- Leveres i komplette sett: guidewire, dilator, nål mm.
- Mykt røntgenpositivt polyuretanmateriale



FOR INTENSIV



Free Flow® ST

- 15,5 FR
- To lumen
- Finnes i rett eller med bøy
- Lateral punktering, 360 ° venøs lumen av arterielumen
- Kateterlås som DuraLock-C holder seg bedre inni kateteret
- Free-Flow® ST gir mulighet for ekstremt høy blodflow
- Leveres i komplette sett: guidewire, dilatator, nål mm.
- Mykt røntgenpositivt polyuretanmateriale



Tri-Flow

- 3-lumen polyuretankateter
- 11,5 FR
- Kuttet spiss
- Finnes rett og med bøy



Hemo-Cath® ST

- Biokompatibelt silikonmateriale
- Innlegges med Seldingerteknikk
- 13.5 FR gir mulighet til høy blodflow
- Mykt materiale gir minimal risiko for knekk
- Kateterløpene kan bøyes uten risiko for knekk. Følger med en spesiell festeanordning som gjør at du kan bøye løpene. Dette gjør det enklere når pasienten har kateteret i vena jugularis interna.
- Leveres med komplett sett for innleggelse
- Finnes i lengdene: 15, 20, 24 og 28 cm



Trio-CT™

- 3-lumen akuttdialysekateter
- 13,5Fr rett kateter
- CE- og 510K-certifisert
- Varmefølsomt polyuretanmateriale
- Ingen knekk selv om kateteret er bøyd
- En myk kateterspiss reduserer risiko for stenose
- Ovalformet design letter innleggelse av kateteret, mens sirkulære, separate lumen i kateteret tillater maksimal blodflow
- 3 separate lumen med fargekoder
- Midtre lumen maks 5 ml / sek / 300psi maks infusjonshastighet
- Symmetriske lumen gir kun 2% resirkulasjon ved kopling omvendt
- Dybdemarkeringer på kateteret gjør det enkelt å markere kateterets dybde
- Roterende vinger gjør det enklere å suturere kateteret, har en ekstra suturflik
- Kompatibel med Grip-Lock



Produktinformasjon 2-lumen		
Produktkode	Produkt	Størrelse
XTP116MT=	Standard 11 FR, 15 cm, rett	10 sett
XTP118MT=	Standard 11 FR, 20 cm, rett	10 sett
XTP116IJS=	Standard 11 FR, 15 cm, med bøy	10 sett
XTP118IJS=	Standard 11 FR, 20 cm, med bøy	10 sett
MFFS1215S	Free Flow 12,5 FR, 15 cm rett	5 sett
MFFS1220S	Free Flow 12,5 FR, 20 cm rett	5 sett
MFFS1224S	Free Flow 12,5 FR, 24 cm rett	5 sett
MFFS1228S	Free Flow 12,5 FR, 28 cm rett	5 sett
MFFS1212IJ	Free Flow 12,5 FR, 12 cm med bøy	5 sett
MFFS1215IJ	Free Flow 12,5 FR, 15 cm med bøy	5 sett
MFFS1220IJ	Free Flow 12,5 FR, 20 cm med bøy	5 sett
MFFS1515S	Free Flow 15,5 FR, 15 cm rett	5 sett
MFFS1520S	Free Flow 15,5 FR, 20 cm rett	5 sett
MFFS1524S	Free Flow 15,5 FR, 24 cm rett	5 sett
MFFS1528S	Free Flow 15,5 FR, 28 cm rett	5 sett
MFFS1512IJ	Free Flow 15,5 FR, 12 cm med bøy	5 sett
MFFS1515IJ	Free Flow 15,5 FR, 15 cm med bøy	5 sett
MFFS1520IJ	Free Flow 15,5 FR, 20 cm med bøy	5 sett
DFST136MTE	Duo Flow III 13 FR, 15 cm rett	5 sett
DFST137MTE	Duo Flow III 13 FR, 17,5 cm rett	5 sett
DFST138MTE	Duo Flow III 13 FR, 20 cm rett	5 sett
DFST1310MTE	Duo Flow III 13 FR, 25 cm rett	5 sett
DFST136CEE	Duo Flow III 13 FR, 15 cm med bøy	5 sett
DFST137CEE	Duo Flow III 13 FR, 17,5 cm med bøy	5 sett
DFST138CEE	Duo Flow III 13 FR, 20 cm med bøy	5 sett
DFST1310CEE	Duo Flow III 13 FR, 25 cm med bøy	5 sett
SDL136E	Hemo-Cath 13,5 FR, 15 cm rett, klips for bøy	5 sett
SDL138E	Hemo-Cath 13,5 FR, 20 cm rett, klips for bøy	5 sett
SDL139E	Hemo-Cath 13,5 FR, 24 cm rett, klips for bøy	5 sett

Produktinformasjon 3-lumen		
Produktkode	Produkt	Størrelse
XTP3114MTE	Tri-Flow 11,5 FR, 12 cm rett	10 sett
XTP3116MTE	Tri-Flow 11,5 FR, 15 cm rett	10 sett
XTP3118MTE	Tri-Flow 11,5 FR, 20 cm rett	10 sett
XTP3119MTE	Tri-Flow 11,5 FR, 24 cm rett	10 sett
XTP3116IJSE	Tri-Flow 11,5 FR, 15 cm med bøy	10 sett
XTP3118IJSE	Tri-Flow 11,5 FR, 20 cm med bøy	10 sett
AS01135121E	Trio-CT 13,5F, 12 cm rett	5 sett
AS01135151E	Trio-CT 13,5 F, 15 cm rett	5 sett
AS01135201E	Trio-CT 13,5 F, 20 cm rett	5 sett
AS01135241E	Trio-CT 13,5 F, 24 cm rett	5 sett
AS01135301E	Trio-CT 13,5 F, 30 cm rett	5 sett