


Trio-CT

3-lumen akuuttidialyysikatetri

- 13,5 FR suora katetri
- CE- ja 510K -sertifioinnit
- Lämpösensitiivinen polyuretaanimateriaali ei "kinkkaa" vaikka katetri taipuisi
- Pehmeä kärki vähentää stenoosiriskiä
- Ovaalin muotoinen desing helpottaa katetrin asentamista mutta katetrin sisällä olevat pyöreät, erilliset lumenet mahdollistavat maksimaalisen verenvirtausnopeuden.
- 3 erillistä lumenta värikoodein ja vetoisuusmitoin
- Keskimmäinen lumen mahdollistaa 5 ml/sec/300 psi infuusionopeuden
- Toimii myös käänteisesti (2 % recirculatio käänteisesti) symmetristen lumenien ansiosta.
- Katetrin syvyysmerkinnät helpottavat asennuksen syvyyden merkitsemistä
- Pyörivät siivet helpottavat katetrin kiinniompelua, mukana ylimääräinen ommelsiipi
- Yhteensopiva Grip-Lock -kiinnitykselle

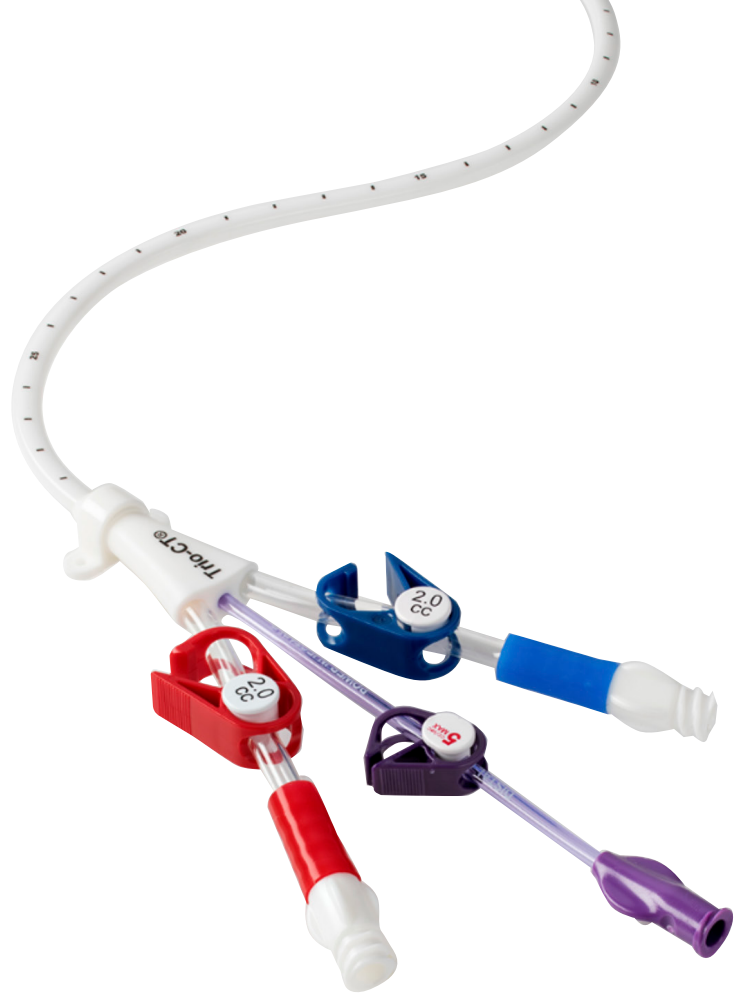

Tilaustiedot

Koko	Pituus	Tyyppi	Tilausnumero
13,5 FR	12 cm	Suora	AS01135121E
13,5 FR	15 cm	Suora	AS01135151E
13,5 FR	20 cm	Suora	AS01135201E
13,5 FR	24 cm	Suora	AS01135241E
13,5 FR	30 cm	Suora	AS01135301E

